


MADE IN  
FRANCE  
since 1992

# Pro-SWING®

Prolapsus par promontofixation  
*Sacrocolpopexy for prolapse*

**PS2 / PS4**

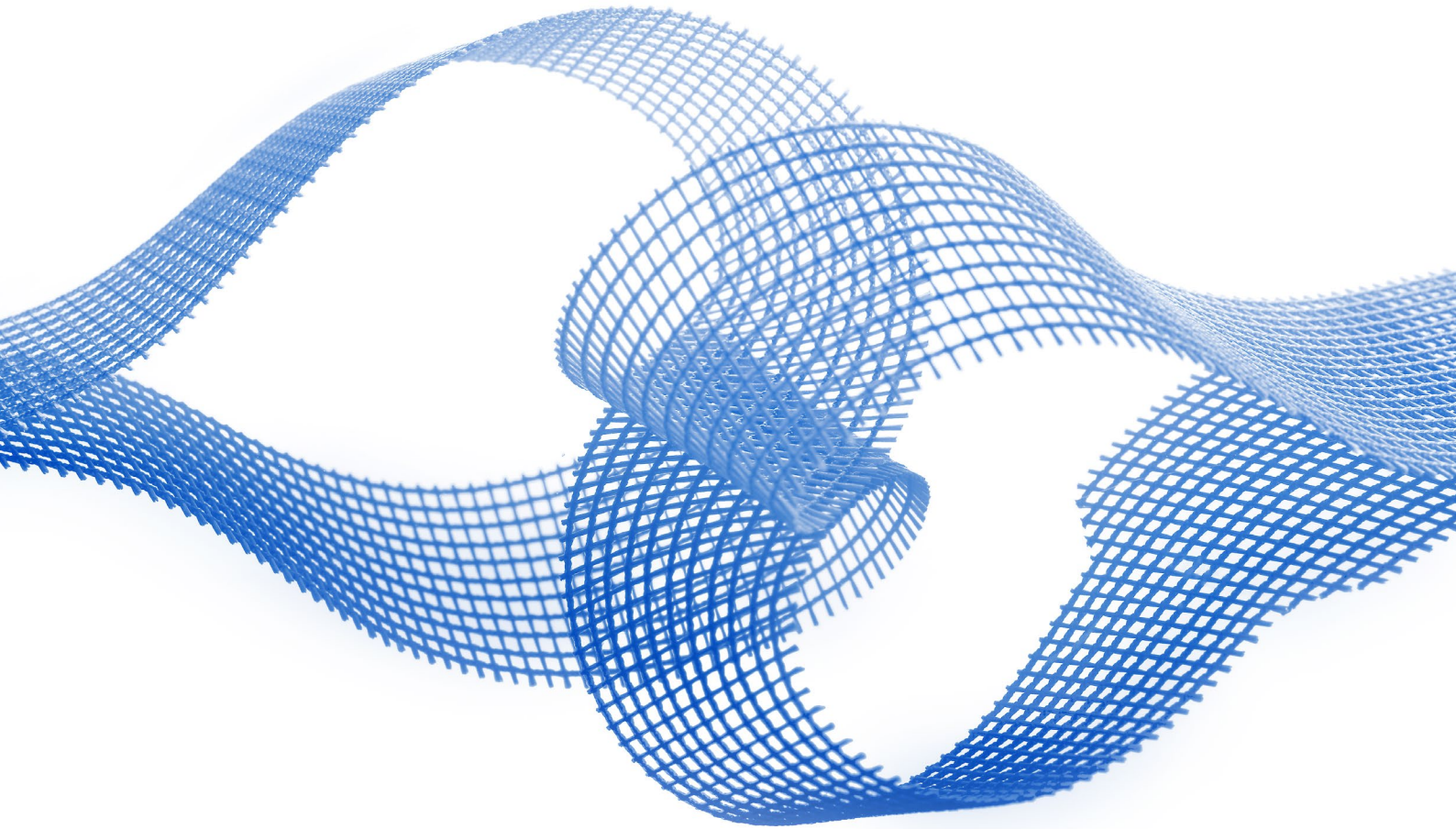

WWW

Chirurgie Uro-Gynécologique  
*Uro-Gynæcological Surgery*

SWING  
TECHNOLOGIES

a THT bio-science division



# Pro-SWING®

Prolapsus par promontofixation

Le dispositif Pro-Swing® est destiné aux cures de prolapsus chez la femme.

*Pro-Swing® device is suitable for female prolapse treatments.*

## **PS 2** POLYESTER - Standard

Prothèses en multifilaments de Polyester (PET) tricoté.  
*Knitted Polyester (PET) multifilaments prosthesis.*

Poids *Weight* - 110 g/m<sup>2</sup>

Taille de Maille *Pore Size* - 1.56 x 1.17 mm

Porosité *Porosity\** - 87% (A) - 45% (C)

Épaisseur *Thickness* - 0.55 mm

Résistance Traction moy. *Mean Tensile Strength* - 300/524 N

Allongement moy. *Mean Elongation* - 59/41%

\* Selon *According to* NF S94-801

## **PS 4** POLYPROPYLENE - Light

Prothèses en monofilament de Polypropylène (PP) tricoté.  
*Knitted Polypropylene (PP) monofilament prosthesis.*

Poids *Weight* - 55 g/m<sup>2</sup>

Taille de Maille *Pore Size* - 1.53 x 1.30 mm


Porosité *Porosity\** - 88% (A) - 62% (C)

Épaisseur *Thickness* - 0.48 mm


Résistance Traction moy. *Mean Tensile Strength* - 244/335 N

Allongement moy. *Mean Elongation* - 10/42%

\* Selon *According to* NF S94-801

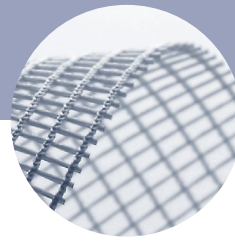

**PS 2**

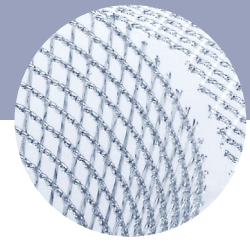

**PS 4**

### **VOIE D'ABORD SURGICAL APPROACH**

#### **Voie cœlioscopique / Laparoscopic approach**

- Une bandelette postérieure fixée aux releveurs pour cure de la rectocèle
- Une bandelette antérieure fixée au promontoire pour cure de la cystocèle
- *A posterior prosthesis to be fixed to levators to treat rectocele*
- *An anterior prosthesis to be fixed to the sacral promontory to treat cystocele*

### **AVANTAGES / ADVANTAGES**

- + Mémoire de forme
- + Structure macroporeuse assurant une colonisation rapide et optimale<sup>1,2,3</sup>
- + Kit de 2 prothèses prédécoupées
- + *Shape memory*
- + *Macroscopic structure for quick optimal tissue ingrowth<sup>1,2,3</sup>*
- + *2 precut prosthesis kit*



# SWING

T E C H N O L O G I E S



a THT bio-science division

**THTBIO-SCIENCE.COM**

**SERVICE COMMERCIAL / SALES DEPARTMENT**

1, rue d'Albisson  
34000 Montpellier (France)  
Tel. : +33 (0)4 99 58 10 92 - Fax : +33 (0)4 67 54 35 84

**SERVICE COMMANDES / CUSTOMER SERVICE**

adv@thtbio-science.com  
export@thtbio-science.com  
Tel. : +33 (0)5 63 98 76 11 - Fax : +33 (0)5 63 98 10 95

